

Ergonomisches Kniekissen mit Befestigungsbändern gegen unbeabsichtigtes Verrutschen.

Das ergonomisch geformte Kissen sorgt für angenehme Polsterung und Entlastung der Kniegelenke beim seitlichen Liegen. Unangenehme Druckschmerzen durch aufeinanderliegende Knie werden aktiv vermindert für ein entspanntes Liegen in Seitenlage. Die angenehm weichen Klett-Befestigungsbänder lassen sich einfach anbringen und sorgen auch im Schlaf für ausreichend Stabilität des Kissens ohne Verrutschen. Der hautfreundliche Velour-Bezug kann für bessere Hygiene separat gewaschen werden.

Anwendung

Positionieren Sie das Kniekissen zwischen Ihren Knien und befestigen Sie es mit den angebrachten Klett-Befestigungsbändern am Bein.

Hinweis

Achten Sie beim Anlegen der Befestigungsbänder stets auf eine geringe Zugspannung, um eine optimale Blutzirkulation zu gewährleisten und ein Einschneiden zu verhindern.

Pflege

Bezug besteht aus Baumwoll-Polyester Mischgewebe, abnehm- und waschbar bei 40° C. Kern aus Polyurethan Schaum, Reinigung im Handwaschbecken mit mildem Waschmittel, ausreichend trocknen lassen, dabei mehrmals wenden.

- | einfach mit 2 bequemen Klettbändern am Bein befestigen
- | vermindert harten Druck auf die Kniegelenke
- | optimale Liegeposition, das Becken wird weniger stark abgeknickt
- | beugt unangenehmem Schwitzen vor
- | Kniekissen mit weichem Velours-Bezug aus 75% Baumwolle und 25% Polyester
- | Masse: ca. 17 x 20 cm und 10 cm an der schmalsten Stelle



Ergonomic knee support cushion with velcro fastening straps to prevent unintentional slipping.

The ergonomically shaped cushion provides comfortable padding and relief for the knee joints when lying on your side. Unpleasant pressure pains caused by knees lying on top of each other are actively reduced when lying in a lateral position. The soft velcro fastening straps are easy to attach and ensure sufficient stability and minimal movement of the cushion, even during sleep. The skin-friendly velour cover can be washed separately for better hygiene.

How to attach the support cushion

Position the knee support cushion between your knees and attach it to your leg using the attached velcro straps.

Please Note

When attaching the fastening straps, always make sure to apply minimum force in order to ensure optimum blood circulation and prevent high pressure to your skin.

Care

The Cover consists of blended cotton-polyester fabric. It is removable and washable at 40° C. The Core is made of polyurethane foam which can be hand washed using mild detergent. Dry carefully turning several times.

- | easy to attach with 2 velcro straps
- | prevents pressure on knee joints
- | optimal lying position, the pelvis is at a better angle
- | prevents unpleasant sweating
- | knee cushion with a soft velour cover, 75% cotton, 25% polyester
- | dimensions: 17 x 20 cm, 10 cm on the inside



Coussin genoux ergonomique avec bandes velcro pour le fixer correctement ...

Le coussin à forme ergonomique permet de réduire la pression au niveau des genoux grâce à son rembourrage, pour une position plus confortable, en position couchée sur le côté. La sensation désagréable due à la pression effectuée au niveau des genoux l'un sur l'autre dans cette position, disparaît de façon significative amenant plus de confort. Les bandes Velcro agréablement douces sont faciles à attacher et assurent une stabilité suffisante du coussin sans qu'il ne glisse, même pendant le sommeil. Pour une meilleure hygiène, la housse en velours moelleuse peut être lavée séparément.

Utilisation

Positionner le coussin entre les genoux et attacher les bandes velcro aux jambes .


Attention

Ne pas trop serrer ou relâcher les sangles de fixation pour éviter tout blocage au niveau de la circulation sanguine.

Nettoyage

La housse en mélange coton-polyester peut être retirée et lavée à 40°. La mousse en polyuréthane peut être lavée à la main avec un produit nettoyant doux. Laisser sécher assez longtemps, tout en la retournant régulièrement.

- | facile à fixer grâce aux 2 bandes Velcro
- | réduit la pression exercée au niveau des genoux
- | position latérale optimale, la hanche est positionnée dans un meilleur angle
- | prévient la transpiration
- | coussin genoux doté d'une housse moelleuse en velours, 75% coton, 25% polyester
- | taille : 17 x 20 cm, 10 cm au milieu du coussin

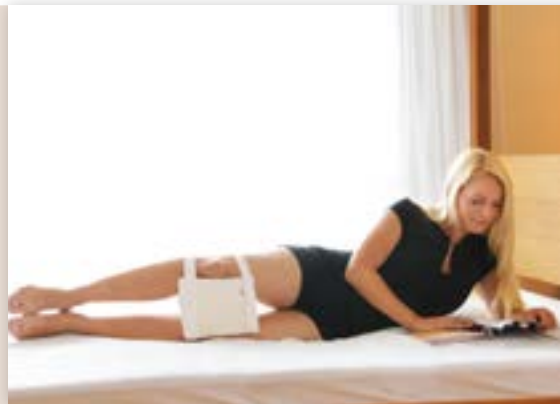

Ergonomisch kniekussen met bevestigingsriemen om wegglijden te voorkomen.

Het ergonomisch gevormde kussen zorgt voor comfortabele opvulling en ondersteuning van de kniegewrichten wanneer je op je zij ligt. Ongemakkelijke drukpijnen veroorzaakt door op elkaar liggende knieën worden actief verminderd om zo ontspannen zijdelings te liggen. De aangenaam zachte klittenbandsluitingen zijn eenvoudig aan te brengen en zorgen voor voldoende stabiliteit van het kussen zonder dat het zelfs tijdens het slapen wegglijdt. De huidvriendelijke velours hoes kan apart worden gewassen voor een betere hygiëne.

Toepassing

Plaats het kniekussen tussen je knieën en bevestig het aan het been met de klittenbandsluitingen van de riemen.


Opgelet

Let bij het omdoen van de klittenbandriemen altijd op om deze niet te hard aan te spannen zodoende een optimale doorbloeding te garanderen en snijwonden te voorkomen.

Onderhoud

De hoes is gemaakt van een mix van katoen en polyester, afneembaar en wasbaar op 40°C. Kussen van polyurethaanschuim kan met de hand gewassen worden met mild wasmiddel. Nadien voldoende laten drogen door meerdere keren te draaien.

- | eenvoudig aan het been te bevestigen met 2 handige klittenbandriemen
- | vermindert harde druk op de kniegewrichten
- | optimale ligpositie, het bekken wordt minder gebogen
- | voorkomt onaangenaam zweten
- | kniebeschermer met zachte velours hoes gemaakt van 75% katoen en 25% polyester
- | afmeting: 17 x 20 cm en 10 cm op het smalste punt

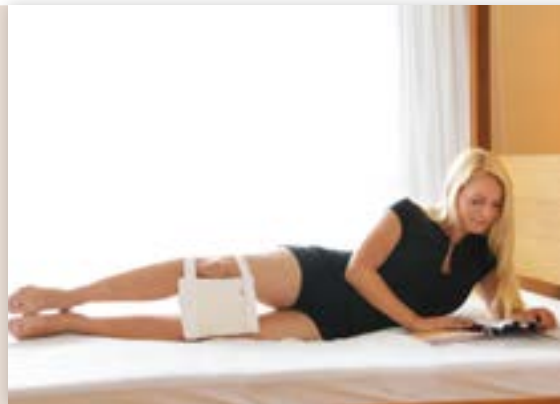

Cojín ergonómico para apoyo de las rodillas ,con correas de cierre de Velcro para evitar un deslizamiento involuntario.

El cojín ergonómico proporciona un cómodo acolchado y un alivio para las articulaciones de la rodilla al estar tumbado de lado. Los desagradables dolores por presión, causados por las rodillas cuando están una encima de la otra, se reducen activamente cuando se está tumbado en posición lateral. La correas suaves de sujeción hechas de Velcro se colocan fácilmente y garantizan una estabilidad suficiente y un movimiento mínimo del cojín, incluso durante el sueño. La funda de terciopelo, que no irrita la piel, puede lavarse por separado para una mejor higiene.

Cómo sujetar el cojín

Coloque el cojín entre sus rodillas y sujételo a la pierna usando las correas de Velcro adjuntas.

Nota

Al sujetar las correas asegúrese siempre de que la tensión sea baja para garantizar una circulación sanguínea óptima y evitar un corte.

Cuidados

La tela de la funda es una mezcla de algodón y poliéster. Se puede quitar y lavar a 40 grados. El núcleo está hecho de espuma de poliuretano lavable a mano con detergente suave. Séquelo con cuidado dándole vueltas varias veces.

- | fácil de sujetar con 2 correas de Velcro
- | evita la presión sobre las articulaciones de las rodillas
- | tumbado, permite una posición óptima, la pelvis está en un mayor ángulo
- | evita el sudor desagradable
- | cojín para la rodilla con funda suave de terciopelo, 75% algodón, 25% poliéster
- | dimensiones: 17 x 20 cm, 10 cm en el interior



Cuscino ergonomico per ginocchia con cinghie di fissaggio in velcro per evitare lo scivolamento involontario.

Il cuscino dalla forma ergonomica fornisce una comoda imbottitura e dona sollievo alle articolazioni del ginocchio quando ci si sdraia su un fianco. Gli spiacevoli dolori da pressione causati dal fatto di avere le ginocchia sovrapposte sono ridotti notevolmente quando si è sdraiati in decubito laterale. Le morbide cinghie di fissaggio in velcro sono facili da fissare e assicurano stabilità sufficiente e movimento minimo del cuscino, anche durante il sonno. La fodera in velluto è piacevole al contatto con la pelle e può essere lavata separatamente per una migliore igiene.

Come fissare il cuscino di supporto

Posiziona il cuscino di supporto per le ginocchia tra le tue ginocchia e fissalo alla tua gamba utilizzando le cinghie di velcro.


Nota bene

Quando si fissano le cinghie, fare sempre attenzione ad applicare una forza minima al fine di garantire una circolazione sanguigna ottimale e prevenire un'eccessiva pressione sulla pelle.

Cura

La fodera è composta da un tessuto misto cotone-poliestere. E' sfoderabile e lavabile a 40° C. Il cuscino è realizzato in schiuma di poliuretano e può essere lavato a mano con un detergente delicato. Asciugare con cura girandolo più volte.

- I facile da fissare con 2 cinghie di velcro
- I previene la pressione sulle articolazioni del ginocchio
- I posizione sdraiata sul fianco ottimale, il bacino è in una posizione migliore
- I previene una spiacevole sudorazione
- I cuscino per le ginocchia con rivestimento in morbido velluto, 75% cotone, 25% poliestere
- I dimensioni: 17 x 20 cm, 10 cm all'interno

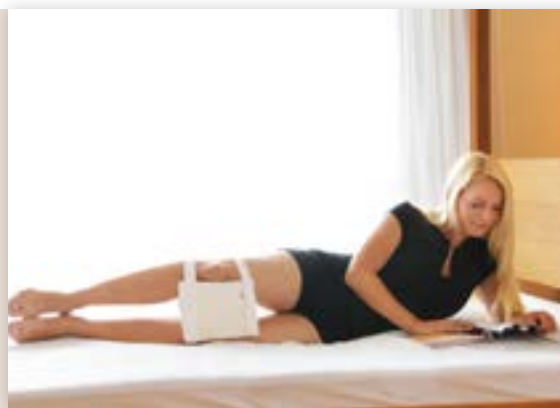

Ergonomiskt knäkudde med fästband som gör att den inte glider.

Den ergonomiskt formade knäkudden med sin angenäma polsterung avlastar knävecken vid sidoläge. Obehagliga trycksmärtor, orsakade av knän som ligger ovanpå varandra, reduceras aktivt för avslappnad liggande på sidan. De behagligt mjuka kardborrebanden är lätta att fästa och säkerställer tillräcklig stabilitet på kudden utan att glida även under sömnen. Det hudvänliga velourskyddet kan tvättas separat för bättre hygien.

Användning

Placera knäkudden mellan knäna och fäst den på benet med kardborrebanden.

OBS

Spänn inte banden för hårt, så att de inte skär i huden.

Rengöring

Överdraget av bomull/polyester är avtagbart och tvättbart vid 40 ° C. Kärna i polyuretanskum. Handtvätt med mild tvättmedel, låt torka tillräckligt, vänd flera gånger.

- I Fäst enkelt med 2 bekväma kardborreband på benen
- I Minskar hårt tryck på knäleden
- I Optimal liggposition, bäcken blir avlastat och mindre böjt
- I Förhindrar obehaglig svettning
- I Knäkudden med mjukt velouröverdrag av 75% bomull och 25% polyester
- I Storlek: 17 x 20 cm och 10 cm vid den smalaste punkten



